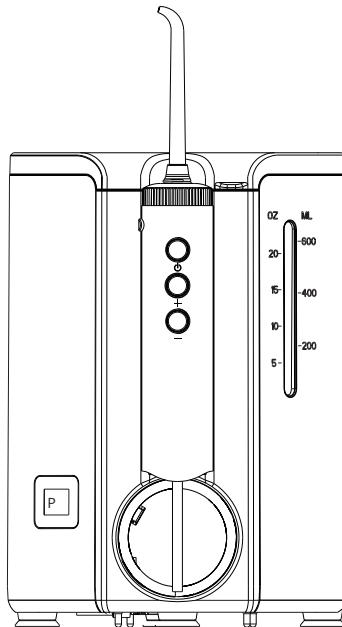


Nicefeel[®]

Irygator stacjonarny 600ml
z zestawem końcówek Nicefeel
FC2520

Instrukcja obsługi



RoHS



CE FC



Ważne środki bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktów elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy w domu są dzieci.

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie przedstawione instrukcje.

Niebezpieczeństwo

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- NIE WOLNO obsługiwać ładowarki mokrymi rękami.
- NIE zanurzaj produktu w wodzie lub innej cieczy.
- NIE używaj produktu podczas kąpieli.
- NIE WOLNO umieszczać ani przechowywać produktu w miejscu, w którym może on wpaść do wanny, prysznicza lub zlewu.
- NIE WOLNO natychmiast podnosić produktu, który wpadł do wody, przed podjęciem jakichkolwiek innych działań należy natychmiast upewnić się, że jest on odłączony od zasilania.
- Przed pierwszym użyciem produktu po zakupie należy sprawdzić, czy adapter nie jest uszkodzony.

W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, pożaru, poważnych obrażeń lub uszkodzenia:

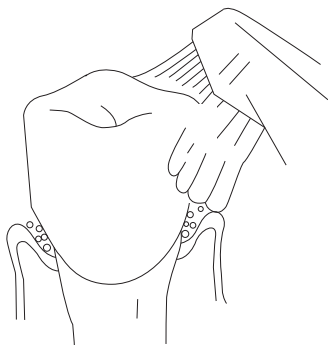
- NIE WOLNO podłączać produktu do adaptera, który nie jest zgodny z podanym napięciem.
- NIE WOLNO używać produktu, jeżeli kabel lub wtyczka są uszkodzone. Jeżeli produkt nie działa normalnie lub jest zanurzony w jakiegokolwiek cieczy, należy skontaktować się z sprzedawcą.
- NIE WOLNO doprowadzać wody pod język, do ucha, nosa lub innych drobnych organów. Ten produkt jest w stanie wytworzyć ciśnienie, które może spowodować poważne uszkodzenia tych organów. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi w celu prawidłowego użytkowania.
- Podczas używania produktu należy przestrzegać instrukcji lub zaleceń specjalistów z dziedziny stomatologii. Niewielkie krwawienie jest normalne przy pierwszym użyciu produktu. Jeżeli krwawienie jest poważne, należy zaprzestać używania i zwrócić się do lekarza dentysty o poradę. Napełnij zbiornik wodą lub innym roztworem zalecanym przez lekarza dentystę.
- NIE WOLNO upuszczać ani wkładać do produktu żadnych obcych przedmiotów.
- Trzymaj ładowarki i przewody z dala od gorących powierzchni.
- NIE używaj produktu w miejscach, gdzie używany jest tlen lub aerozole.
- NIE używaj płynu do płukania ust lub roztworu do płukania zawierającego jod lub środek dezynfekujący.
- NIE WOLNO używać produktu, gdy ma się na sobie akcesoria stomatologiczne, które należy zdjąć przed użyciem.

- NIE stosuj produktu, jeśli na języku lub w jamie ustnej znajduje się otwarta rana.
- Jeżeli lekarz zaleci Państwu przyjmowanie antybiotyków przed zabiegiem chirurgicznym, proszę skonsultować się z dentystą przed użyciem tego produktu lub jakiegokolwiek innego środka do higieny jamy ustnej.
- Tylko do użytku domowego. NIE stosuj produktu na zewnątrz.
- Dzieci i osoby o specjalnych potrzebach powinny być dokładnie prowadzone i nadzorowane w celu prawidłowego stosowania produktu.
- Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia właściwego stosowania produktu.


Czyszcząc zęby pulsacyjnym strumieniem wody, irygator doustny może usunąć szkodliwe bakterie ukryte głęboko w szczelinach między zębami i poniżej linii dziąseł, których nie można oczyścić wyłącznie szczotkując zęby.

Tradycyjna pielęgnacja jamy ustnej

Tradycyjne szczoteczki do zębów nie są w stanie usunąć resztek jedzenia i głęboko ukrytych szkodliwych bakterii.




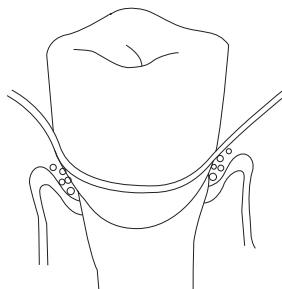Mogą one dotrzeć tylko do ograniczonej części poniżej linii dziąseł.




Irygator do jamy ustnej Nicefeel

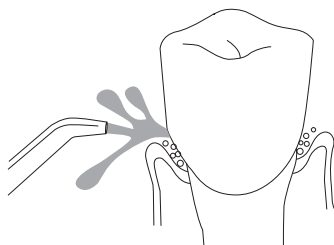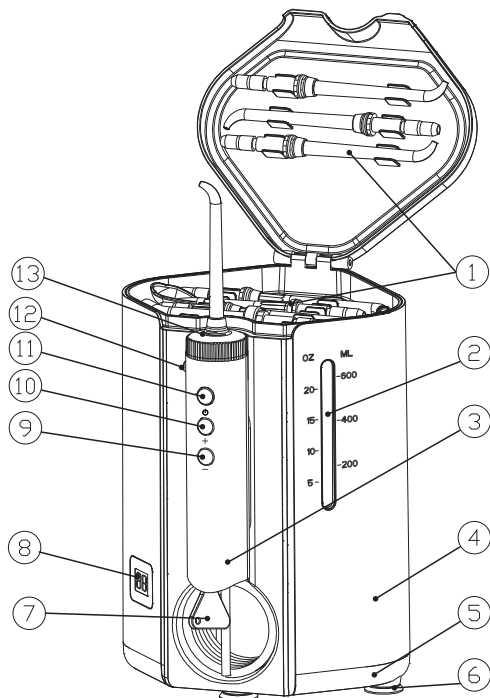Usuwa szkodliwe bakterie ukrywające się głęboko w szczelinach między zębami i poniżej linii dziąseł.


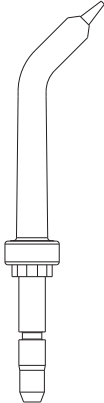
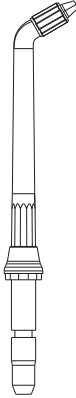
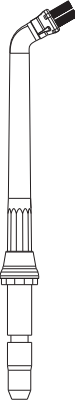
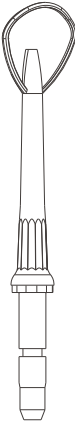


Firma zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji w przypadku błędów lub niezrozumienia treści niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie aktualizacje produktu lub danych zostaną włączone do nowej wersji bez uprzedniego powiadomienia, a w przypadku zmian w wyglądzie i kolorze produktu, pierwszeństwo ma produkt znajdujący się w opakowaniu.

Opis produktu



1. Kombinacja dysz
2. Zbiornik na wodę (ukryty)
3. Zdalnie sterowany uchwyt
4. Korpus
5. Podstawa
6. Przyssawka do podstawy
7. Przycisk
8. Wskaźnik trybu
9. Przycisk zmniejszania obrotów
10. Przycisk zwiększania obrotów
11. Przycisk zasilania i pauzy
12. Przycisk zdejmowania dyszy
13. Dysza obrotowa 360°

				
Zwykła końcówka wysokociśnieniowa	Końcówka do kieszonek przyzębnych	Końcówka do usuwania płytki nazębnej	Szczoteczka ortodontyczna	Końcówka do czyszczenia języka

* Zwykła końcówka wysokociśnieniowa składa się z trzech kolorowych pierścieni dla trzech osób (Pakiet rodzinny)

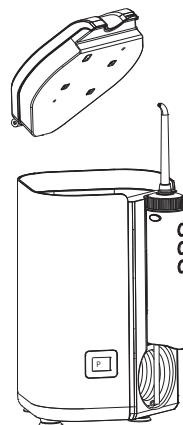
Krwawienie dziąseł jest normalnym zjawiskiem wynikającym z różnej tolerancji przy pierwszym użyciu irygatora. Prosimy o swobodne korzystanie!

Instrukcja użytkowania

Podłącz przewód do gniazdka. Jeżeli gniazdo jest sterowane przez wyłącznik ścienny, należy upewnić się, że wyłącznik jest włączony. Przyciski zasilania i pauzy oraz dwa przyciski trybów znajdują się w przedniej części uchwytu produktu, przy czym ten ostatni (przycisk pauzy) może zdalnie sterować trybem w celu regulacji ciśnienia wody. Po podłączeniu zasilania, na małym ekranie po lewej stronie korpusu urządzenia pojawi się napis "P (Pauza)". Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk zasilania, a na ekranie wyświetlą się tryby 01-10, z których można wybrać jeden, aby kontrolować ciśnienie wody podczas użytkowania. Pomiedzy włączeniem i wyłączeniem urządzenia ustawiony jest czas 3 minut (uwaga: aby uruchomić produkt po wyłączeniu czasowym, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania).


Przygotowanie zbiornika na wodę

Zdejmij korek zbiornika na wodę z górnej części urządzenia. Po napełnieniu zbiornika ciepłą wodą, załóż z powrotem korek i mocno go dociśnij. Zbiornik na wodę jest ukryty wewnątrz korpusu, po którego prawej stronie znajduje się długie okienko, przez które można wyraźnie zobaczyć poziom wody w zbiorniku. Na powierzchni dużego korpusu znajduje się oznaczenie pojemności w uncjach i mililitrach.




Wkładanie i wyjmowanie końcówki

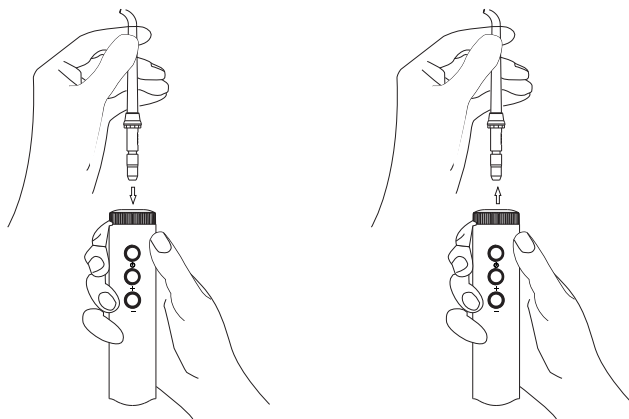Włóż dyszę do środka pokrętki znajdującego się na górze uchwytu irygatora. Jeżeli dysza jest zablokowana, kolorowy pierścień powinien znajdować się na równi z końcem pokrętki. Aby wyjąć szczoteczkę z uchwytu, proszę nacisnąć przycisk wysuwania końcówki i wyciągnąć ją z uchwytu.





Regulacja ustawień ciśnienia

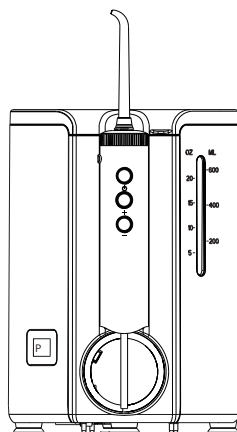Przy pierwszym użyciu produktu, proszę wyregulować ciśnienie na uchwycie produktu na minimalną wartość (tryb wyświetlany na korpusie można regulować w zakresie od 01 do 10). Rozpocznij od najniższego trybu, włącz przełącznik na uchwycie i stopniowo zwiększaj ciśnienie, aż jama ustna się do niego dostosuje. Mogą Państwo również zwiększać nacisk pod okiem profesjonalnego dentysty.




Używanie irygatora do jamy ustnej

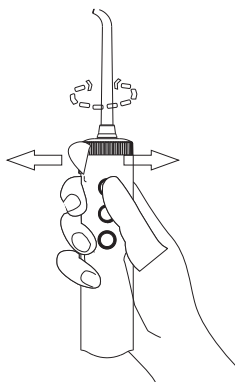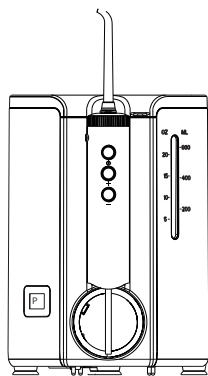Pochyl się nad umywalką i umieść głowicę iniektora w ustach. Wyrównaj dyszę do zębów. Włącz przełącznik na uchwycie, aby wyregulować ciśnienie wody do pożądanej wartości. Kontroluj kierunek przepływu wody, obracając pokrętko na górze uchwytu.



Wskazówki dotyczące stosowania

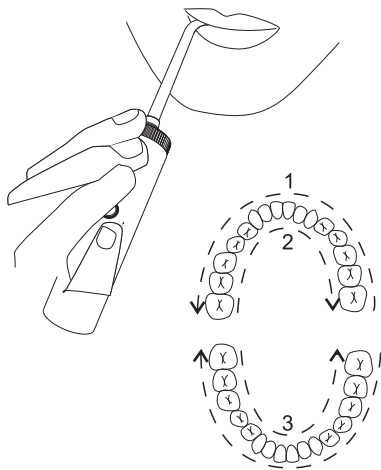Ustaw strumień wody pod kątem 90 stopni do linii dziąseł. Zamknij usta, aby zapobiec spływaniu wody na boki, jednocześnie pozwalając wodzie w ustach swobodnie spływać do umywalki. Aby uzyskać najlepszy efekt, należy rozpocząć czyszczenie od zębów trzonowych (tylnych) w kierunku zębów przednich. Przesuwaj głowicę irygatora wzdłuż linii dziąseł, robiąc krótkie przerwy między zębami. **NIE** zatrzymuj się, dopóki nie zostaną oczyszczone obszary wokół dziąseł i między zębami.




Kontrola pauzu

W każdej chwili można wyłączyć przycisk zasilania na rękojeści irygatora ustnego i umieścić rękojeść z powrotem na korpusie, aby tymczasowo zatrzymać przepływ wody.



Po użyciu

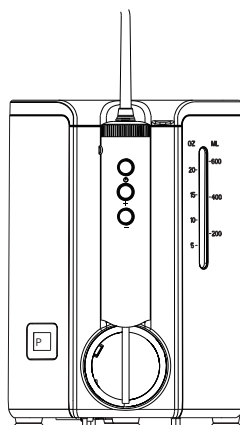
Wyłącz urządzenie, wylej płyn pozostały w zbiorniku i wyciągnij wtyczkę. Gdy urządzenie zostanie ponownie włączone, przywróci tryb używany poprzednio na podstawie pamięci głównej.



Instrukcja użytkowania końcówek


Końcówka wysokociśnieniowa

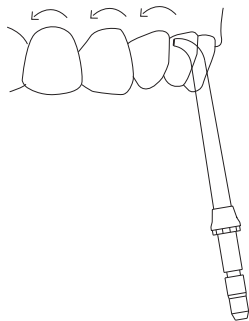Dokładnie płucz w głębi jamy ustnej, aby oczyścić miejsca trudne do wyczyszczenia szczoteczką do zębów. Skuteczniejsza niż nić dentystyczna, sprawia, że dziąsła są zdrowsze.




Szczoteczka do kieszonek periodontologicznych

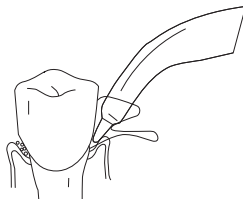Szczoteczka może wstrzykiwać wodę lub płyn antybakteryjny do określonych miejsc poniżej linii dziąseł. Podczas korzystania z końcówki do zębów należy pochylić się nad umywalką, przyłożyć miękką głowicę szczoteczki do zębów pod kątem 45 stopni i delikatnie włożyć głowicę szczoteczki do kieszonki międzyzębowej poniżej linii dziąseł. Włącz urządzenie i zminimalizuj nacisk, delikatnie umieść szczoteczkę na szczelinie między zębami, a następnie wyczyścić ją wzdłuż linii dziąseł. Kontynuuj ruch wzdłuż linii dziąseł, aż do zakończenia płukania.




Końcówka do czyszczenia języka

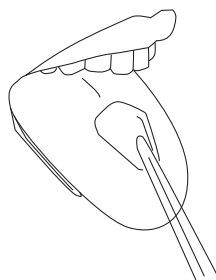Pochyl się nad umywalką. Umieść czyścik na języku i uruchom irygator doustny. Najpierw użyj najniższego ciśnienia, a następnie zwiększ ciśnienie w zależności od stopnia komfortu. Delikatnie umieść czyścik na środku tylnej części języka i delikatnie pociągnij go do przodu w kierunku języka.




Dysza ortodontyczna

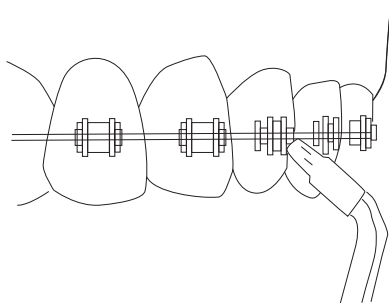Specjalna dysza ortodontyczna jest przeznaczona do wycierania i płukania miejsc trudno dostępnych dla aparatów ortodontycznych i innych. Podczas używania końcówki ortodontycznej należy pochylić się nad umywalką, a strumień wody usunie zanieczyszczenia.



Końcówka do usuwania płytki nazębnej

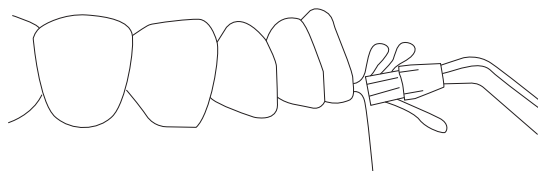Wyrównaj końcówkę z dziąsłami pod kątem 90 stopni i lekko zamknij usta, aby zapobiec rozpryskiwaniu wody, pozwalając jednocześnie wodzie wypływać z kącików ust do umywalki. Rozpocznij płukanie od zębów trzonowych (tylnych) i stopniowo do zębów przednich. Dysza powinna znajdować się na tyle blisko zębów, aby włosie mogło delikatnie dotykać zębów. Delikatnie przesuwaj dyszę wzdłuż dziąseł z krótką przerwą między dwoma zębami, aby umożliwić wodzie przejście między zębami. Powtórz tę samą procedurę po każdej stronie zębów, aż do wyczyszczenia całej części między zębami, jak również przedniej, tylnej, górnej i dolnej części zębów.



Czyszczenie

Jeżeli w zbiorniku na wodę użyto jakiegoś specjalnego roztworu, proszę dobrze wypłukać urządzenie. Wlej trochę ciepłej wody do zbiornika na wodę. Skieruj dyszę w stronę umywalki. Włącz urządzenie i nie wyłączaj go, dopóki zbiornik wody nie zostanie opróżniony. Pomoże to zapobiec zatkaniu dyszy i przedłuży żywotność urządzenia.

Czyść produkt szmatką, a w razie potrzeby należy użyć łagodnego, nieściernego środka czyszczącego.

Przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Wyjmij zbiornik na wodę i uruchom irygator doustny do momentu, aż nie pozostaną żadne pozostałości.

Konserwacja

1. Po każdym użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i położyć zbiornik na wodę do góry nogami na płaskiej powierzchni. Po całkowitym spuszczeniu wody i wytarciu do sucha, umieść zbiornik na wodę w chłodnym i suchym miejscu wraz z wyczyszczonym korpusem. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go przechowywać w opakowaniu lub kartonie o podobnej funkcji przechowywania.

2. W przypadku awarii, mogą Państwo skonsultować się ze sprzedawcą.

3. Nie należy samodzielnie demontować produktu, ponieważ szkody spowodowane takim zachowaniem nie są objęte gwarancją.

4. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy udać się do miejsca konserwacji. NIE WOLNO samodzielnie wymieniać przewodu zasilającego lub wtyczki.

Wymiana baterii

Jeżeli bateria wymaga wymiany, za pomocą klucza ustaw otwór blokujący w dolnej części uchwytu, a następnie naciśnij przycisk. Bateria w uchwycie wysuwa się. Przy każdej wymianie baterii nacisk jest taki sam jak ostatnio. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nieszczelność między dyszą a pokrętelem uchwyty	Szczotka nie jest dobrze dopasowana do uchwyty.	Wymij szczoteczkę i dobrze ją włóż
Pęknięcie szczoteczki do kieszonek przyzębnych	Szczoteczka jest poważnie zużyta.	Wymień szczoteczkę
Nieszczelność na węży łączącym podstawę z uchwytem irygatora doustnego	Uszkodzenie węży	Wymień ją samodzielnie lub skontaktuj się z dealerem.
Zbiornik wody przecieka.	Sprężyna nie jest zainstalowana lub jest zainstalowana w niewłaściwej pozycji.	Zamontuj sprężynę w prawidłowej pozycji lub skontaktuj się z dealerem w celu naprawy.
Ciśnienie nie jest wystarczające.	Nieprawidłowa instalacja zbiornika na wodę	Ponownie zamontuj zbiornik wody i mocno dociśnij.
Urządzenie nie może się uruchomić.	Silnik nie pracuje.	Sprawdź, czy jest zasilanie, lub skontaktuj się ze sprzedawcą w sprawie naprawy.
Przyciski na uchwycie nie mogą być używane.	Sprawdź, czy bateria nie jest uszkodzona lub czy nie jest źle zamontowana.	Wymień baterię.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.