


# ANLAN

Wyszczuplające urządzenie do ciała  
ANLAN 02-AXTY31-02A

Instrukcja obsługi

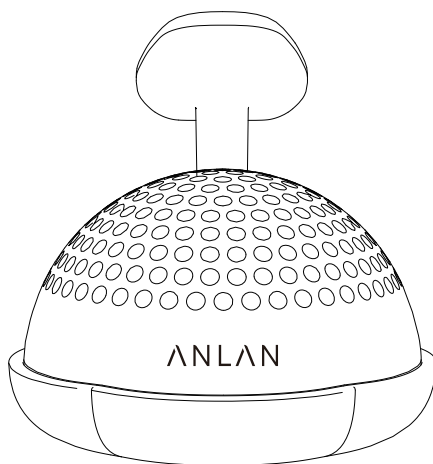

Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym używanym do diagnozowania lub leczenia. Produkt służy do pielęgnacji oczu, twarzy i szyi.

Dziękujemy za zakup urządzenia marki ANLAN. Prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji przed jego użyciem, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i bezpieczeństwo.

## Środki ostrożności

Aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniom mienia użytkowników, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z jej zawartością.

### Ostrzeżenia:

- Nie należy używać tego urządzenia z następującym medycznym sprzętem elektrycznym:
  - Małe implanty elektromagnetyczne, takie jak rozrusznik serca.
  - Urządzenia medyczne do podtrzymywania życia, takie jak sztuczne serce/sztuczne płuco.
  - Przenośne medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak urządzenia do elektrokardiogramu.

Wymienione poniżej osoby nie powinny używać urządzenia:

- Osoby z chorobami serca
- Osoby z alergiami skórnymi
- Osoby, które nie odczuwają zmian temperatury
- Osoby z neuropatią twarzy
- Osoby z chorobami skóry i atopowym zapaleniem skóry
- Osoby z nieprawidłowościami krwi, takimi jak zaburzenia krwawienia i hemofilia
- Dzieci i osoby niepełnosprawne
- Osoby z urazami
- Osoby w ciąży i w połogu

Nie należy używać w następujących przypadkach lub częściach ciała:


- W przypadku złego samopoczucia
- W okolicach ust, powiek, uszu, szyi z tętnicami
- Obszary skóry, które były depilowane w danym dniu
- Obszary skóry z zadrapaniami, egzemą, obrzękiem, trądzikiem itp.
- Miejsca poddawane zabiegom chirurgicznym (chirurgia plastyczna, zabiegi kosmetyczne itp.).
- W przypadku nieprawidłowości na skórze, takich jak zapalenie skóry lub nadmierne oparzenia słoneczne.
- Podczas przyjmowania hormonów steroidowych, leków immunosupresyjnych lub leków powodujących senność.

Poniższe osoby przed rozpoczęciem użytkowania powinny skonsultować się z lekarzem:


- Osoby z poważnymi chorobami
- Osoby z gorączką
- Osoby z chorobami zakaźnymi
- Osoby z nowotworami złośliwymi
- Osoby o wyjątkowo wrażliwej skórze

- Osoby z historią poważnych chorób
- Osoby z zaburzeniami czucia spowodowanymi poważnymi zaburzeniami krążenia obwodowego, takimi jak cukrzyca
- Pacjenci wymagający odpoczynku pooperacyjnego lub osoby, które doświadczyły fizycznego dyskomfortu z powodu operacji w ciągu dwóch tygodni.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak ogień,
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.
- Należy przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć możliwych wypadków lub obrażeń.
- Nie należy ładować produktu w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka, aby uniknąć zwarcia i porażenia prądem.
- Nie należy wkładać ani odłączać adaptera z gniazdka mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń.
- Nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj produktu w wysokiej temperaturze, aby uniknąć nagrzewania, zapalenia lub wybuchu wbudowanego akumulatora.


## Opis produktu

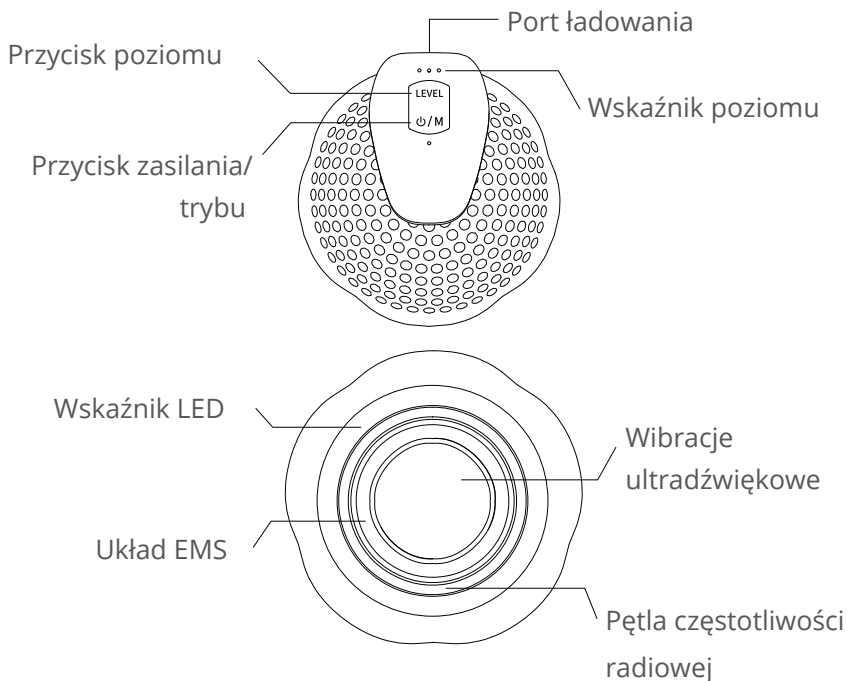


## Zawartość zestawu

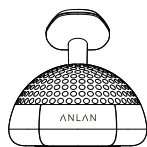


Główne urządzenie\* 1

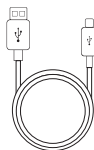

Kabel ładowający\* 1

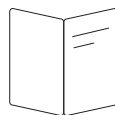

Instrukcja obsługi\* 1

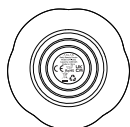

Podstawa silikonowa\*1



Etui do przechowywania\*1

## Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: Body Beauty Device

Model: OFY-2102

Wymiary: ok. 85\*85\*84 mm

Waga: Ok. 170 g

Materiał: ABS

Częstotliwość radiowa: 1.9 MHz

EMS: 80 KHz

Fale ultradźwiękowe: 3.2 MHz

Długość fali świetlnej: Czerwona 620 ± 10nm; Niebieska 470±10nm; Fioletowa 390±10nm

Prędkość obrotowa silnika: Ok. 9000 obr/min

Port ładowania: Ładowanie przez micro USB

Pojemność akumulatora: 1100mAh

Czas pracy: Ok. 40 minut (maksymalna moc)

Czas ładowania: Ok. 180 minut

Port wejściowy: DC 5V = 1A

Napięcie: 7.4 V

Timer: 10 minut

Wodoodporność: IPX6


Rzeczywisty czas pracy zależy od warunków użytkowania i środowiska pracy.

## Przed rozpoczęciem użytkowania

Należy wykonać test na skórze:

Przetestuj produkty do pielęgnacji skóry, których zwykle używasz, aby upewnić się, że są one dostosowane do urządzenia i zapobiec możliwym alergiom.

Pamiętaj, aby wykonać test skórny, aby zapobiec wszelkim alergiom.

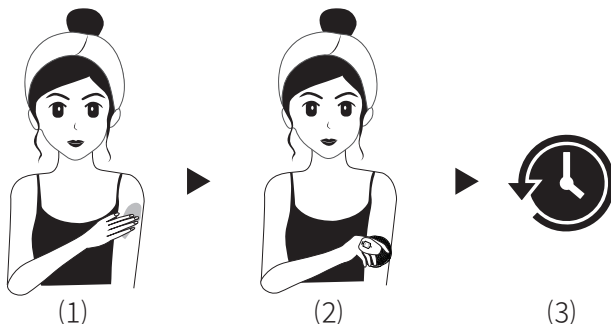

1. Umyj ramię mydłem i wytrzyj je ręcznikiem.
2. Włącz produkt, wybierz tryb 1, wykonaj test skórny, używając go z codziennymi produktami do pielęgnacji skóry.
3. Jeśli po 24 godzinach nie wystąpią żadne nieprawidłowości, można rozpocząć użytkowanie urządzenia.

Jeśli po wykonaniu testu wystąpią nietypowe objawy (takie jak intensywne swędzenie lub ból), produkt może działać nieprawidłowo w połączeniu z wybranymi kosmetykami. Należy zakończyć użytkowanie.

## Prawidłowa obsługa produktu

Przytrzymaj urządzenie w sposób pokazany poniżej. Ustaw głowicę prostopadle i przyłóż całą metalową powierzchnię do skóry. Nachylenie głowicy może spowodować, że produkt nie będzie miał całkowitej styczności ze skórą, co doprowadzi do jej uszkodzenia.



## Opis przycisków

⏻/M Przycisk zasilania/trybu

Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.  
Naciśnij przycisk przez 1 sekundę, aby przełączać między trzema trybami. Tryb 1 -> Tryb 2 -> Tryb 3 (powtarzanie).

**LEVEL** Przycisk poziom

Naciśnij, aby przełączać między trzema poziomami lub 3 trybami wibracji. Poziom 1 -> poziom 2 -> poziom 3 lub wibracja 1 wibracja -> 2 -> wibracja 3 (Powtarzanie).

## Opis trybów

Tryb	Kombinacja funkcji	Częstotliwość użytkowania	Wskazany czas
Tryb 1	Ultradźwięki + Wibracje + Niebieskie światło	2-3 razy w tygodniu	10 minut
Tryb 2	RF + EMS + Czerwone światło	2-3 razy w tygodniu	10 minut
Tryb 3	Ultradźwięki + Wibracje + RF + EMS + Fioletowe światło	2-3 razy w tygodniu	10 minut

Nie jest konieczne używanie wszystkich trybów w ciągu jednego dnia. Należy wybrać odpowiedni tryb i dostosować czas użytkowania do stanu skóry.

Uwaga: Nadużywanie może obciążać skórę, dlatego należy unikać użytkowania wszystkich trybów na tym samym obszarze każdego dnia.

Po 10 minutach od włączenia zasilanie zostanie automatycznie wyłączone. Przełączenie trybu w połowie czasu trybu czuwania spowoduje ponowne odliczenie czasu.

## Uwagi dotyczące użytkowania

Wskazane jest używanie produktu po kąpeli.

Wskazane jest używanie produktu z rozpuszczalnym w wodzie balsamem lub żelem. Podczas użytkowania należy przesuwac urządzenie po skórze. Zbyt długie pozostawanie na tym samym obszarze może spowodować oparzenia.

Częstotliwość użytkowania: zależy od własnych potrzeb i odczuć, np. jeden obszar przez 10 minut lub 5 minut na każdy z 3 obszarów. Wskazane jest stosowanie 3 razy w tygodniu.

## Użytkowanie produktu

- Nie należy używać na twarz.

1. Po kąpieli nałóż na skórę balsam lub serum.

2. Przytrzymaj przycisk zasilania/trybu, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij go, aby wybrać tryb 1/tryb 2/tryb 3.


3. Naciśnij przycisk poziomy, aby dostosować poziom. Dostosuj poziom od 1 do 3 w zależności od stanu skóry.

Uwaga: przy pierwszym użyciu wypróbuj poziom 1. Wraz ze wzrostem przyzwyczajenia ciała do produktu, stopniowo zmieniaj poziom.


4. Przytrzymaj główną obudowę suchymi, gołymi rękami i przesuwaj produkt, tak aby cała głowica dotykała skóry i nie pozostawała zbyt długo w jednym miejscu.

5. Przytrzymaj przycisk zasilania/trybu, aby wyłączyć zasilanie.


## Wskazania dotyczące stosowania na ciało

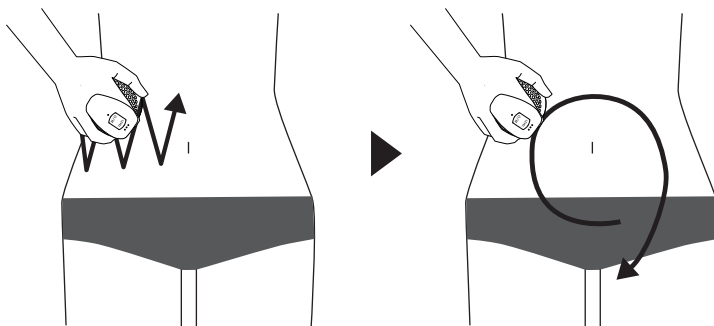

Brzuch: Przesuwaj urządzenie w górę i w dół ruchem przypominającym zygzak na brzuchu i wykonuj okrężne ruchy wokół pępka.

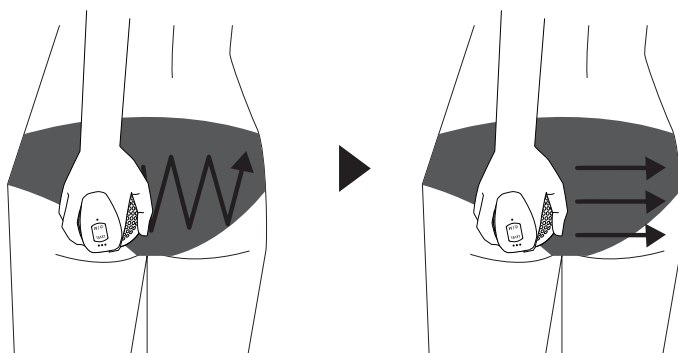


Pośladki: Przesuwaj urządzenie w górę i w dół ruchem przypominającym zygzak i naciskaj od wewnętrznej do zewnętrznej strony pośladka.

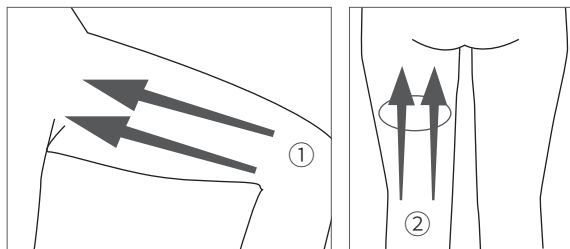


Uda:

1. Masuj obszar od wewnętrznej strony kolana do wewnętrznej strony uda w pobliżu pachwiny.
2. Przesuwaj urządzenie od tylnej części kolana w górę do pośladków i wykonaj masaż.

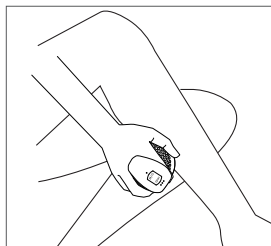

Łydka: Masuj od tylnej części kostki do tylnej części kolana.

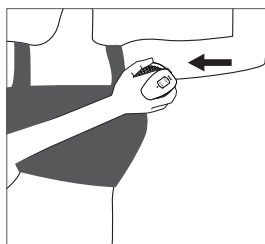

Ramiona: Z dłońmi skierowanymi w górę, opuść ramiona prosto i masuj od wewnętrznej strony łokci do pach.

## Ładowanie produktu

- Podczas ładowania: Gdy adapter jest podłączony, wskaźnik miga.
- Pełne naładowanie: Przybliżony czas ładowania wynosi około 3 godzin. Po pełnym naładowaniu wskaźnik pozostaje włączony.
- Niski poziom naładowania akumulatora: wskaźnik miga przez cały czas, aż do rozładowania akumulatora.
- Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub nie było używane przez dłuższy czas, należy je naładować przed użyciem. Ponadto, aby zabezpieczyć wbudowany akumulator, należy ładować go raz w miesiącu, nawet jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.



- Urządzenie może się lekko nagrzewać podczas ładowania, ale nie jest to usterka.
- Aby zapobiec przeładowaniu, należy odłączyć kabel po zakończeniu ładowania. Dalsze ładowanie akumulatora przez długi czas po pełnym naładowaniu spowoduje skrócenie jego żywotności.
- Produkt nie może być używany podczas ładowania.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że port ładowania jest czysty i suchy.
- Należy używać określonego w instrukcji obsługi napięcia i zasilacza sieciowego.

## Konserwacja

- Po odpowiednim czasie użytkowania należy wyłączyć zasilanie.
- Urządzenie nie jest przystosowane do czyszczenia wodą.
- Powierzchnia głowicy jest wodoodporna (IPX6), ale port ładowania i przyciski nie są wodoodporne, dlatego nie należy wkładać urządzenia do wody ani spryskiwać go wodą. W przypadku zabrudzenia, należy wytrzeć je mokrym ręcznikiem lub ręcznikiem papierowym.
- Nigdy nie używaj rozcieńczalnika lub benzyny do czyszczenia urządzenia.
- W przypadku zabrudzenia należy je wytrzeć ręcznikiem lub chusteczką.
- Nie należy wkładać korpusu do ognia ani przegrzewać go.
- Nie należy pozostawiać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Produkt nie powinien być demontowany, naprawiany ani modyfikowany przez inne osoby niż serwisanci.
- Nie należy pozostawiać produktu w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka.
- Należy przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci, w bezpiecznym miejscu.
- Należy przestrzegać powyższych środków ostrożności i ostrzeżeń.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie obrażenia, awarie, uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, demontażem, modyfikacją, naprawą itp.

## Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak odczuć przy korzystaniu z trybu RF.	Skóra jest zbyt sucha, aby używać trybu RF.	Przed użyciem należy nawilżyć skórę żelem.
	Zbyt szybkie przesuwanie urządzenia.	Przesuwaj urządzenie wolniej.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie uruchamia.	Użytkownik nie przytrzymał wystarczająco długo przycisku zasilania.	Należy przytrzymać przycisk zasilania przez ok. 1 s.
Produkt działa jedynie kilka minut po naładowaniu.	Niepełne naładowanie produktu.	Należy całkowicie naładować produkt.
	Błąd urządzenia.	Należy skontaktować się z serwisem sprzedawcy lub producenta.
Urządzenie jest zbyt nagrzane.	Używane nieprzerwanie przez zbyt długi czas. Używane w niewłaściwej temperaturze.	Wyłącz zasilanie i pozostaw produkt na 10 minut lub dłużej.
Urządzenie się nie ochładza w trybie chłodzenia.		Należy używać produktu w temperaturze od 15°C do 30°C.

Tryb Ion/EMS jest zbyt silny (bolesny).	Ustawienie niewłaściwego poziomu.	Należy wybrać niższy poziom.
	Górna część urządzenia nie dotyka całkowicie skóry.	Upewnij się, że cała górna część dotyka skóry.
Tryb Ion/EMS jest zbyt słaby.	Ustawienie niewłaściwego poziomu.	Należy wybrać wyższy poziom.
	Skóra jest zbyt sucha, aby używać trybu EMS. Urządzenie nie dotyka skóry całkowicie.	Przed użyciem należy zwilżyć skórę balsamem i upewnić się, że produkt dotyka skóry całkowicie.
Tryb RF jest zbyt gorący.	Urządzenie pozostaje zbyt długo na tej samej części skóry.	Przesuń urządzenie, aby masować skórę.
	Zbyt powolne przesuwanie urządzenia.	Przesuwaj urządzenie szybciej.

## Najczęściej zadawane pytania

P: Przy użytkowaniu odczuwalne jest lekkie mrowienie.

O: Podczas używania trybu z EMS odczuwanie lekkiego mrowienia jest prawidłowe. Aby poczuć się bardziej komfortowo:

- ① Przechowuj skórę wystarczająco nawilżoną za pomocą odpowiedniego żelu.
- ② Na początku użytkowania wybierz poziom 1 i stopniowo zwiększaj jego intensywność w miarę przyzwyczajania skóry.

P: Jak często używać urządzenia?

O: Wskazane jest używanie przez 10 minut na tym samym obszarze, 3 razy w tygodniu. Informacje mają jedynie charakter referencyjny. Używaj produktu w zależności od stanu skóry i preferencji.

P: Czy można używać tego produktu na twarz?

O: Nie. To urządzenie posiada większą moc niż pozostałe urządzenia do masażu twarzy ANLAN i może wywierać zbyt duży nacisk na wrażliwą skórę o niskiej zawartości tkanki tłuszczowej. Wskazane jest używanie tego produktu na obszarach takich jak ramiona, łydki, uda, brzuch, biodra i pośladki.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /  
producenta dostępne na stronie internetowej  
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

## **Akumulator LI-ION**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## **Akumulator LIPO**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.